

Produit	No d'article	Unité de vente
hyghtec basic	V01-10015	1 drainage
hyghtec basic-plus	V01-10017	1 drainage
hyghtec bag	V01-10016-05	5 sacs collecteurs
	V01-10016-10	10 sacs collecteurs
	V01-10016-50	50 sacs collecteurs (5x10)

Un emballage contient un drainage, une seringue de remplissage graduée, un sac collecteur (hyghtec bag) ainsi que le manuel d'utilisation détaillé.

présenté par :

Revendeur :

Advanced Medical Ballons GmbH | Bruchsaler Straße 22 | 68753 Waghäusel | Allemagne
info@hyghtec.de | www.hyghtec.de

Fabriquant :

Creative Balloons GmbH | Bruchsaler Straße 22 | 68753 Waghäusel | Allemagne

DRAINAGE FÉCAL

hyghtec® basic | hyghtec® basic-plus

... pour un drainage étanche de la diarrhée dès les premiers jours

un concept modulaire orienté sur les besoins du patient

un joint trans-anal sûr même lors de diarrhées très aqueuses

conçu pour une mise en place à basse pression respectueuse des tissus

hyghtec[®] basic

... pour un drainage à court terme de la diarrhée facile à utiliser, l'alternative économique au collecteur fécal

Ⓐ

ancrage intra-rectal segment ballonné par

Ⓑ

segment ballonné trans anal étanche

Ⓒ


tube de drainage des selles

Ⓓ

olive pour une insertion facilitée

Ⓔ

anneau coloré pour contrôle de position

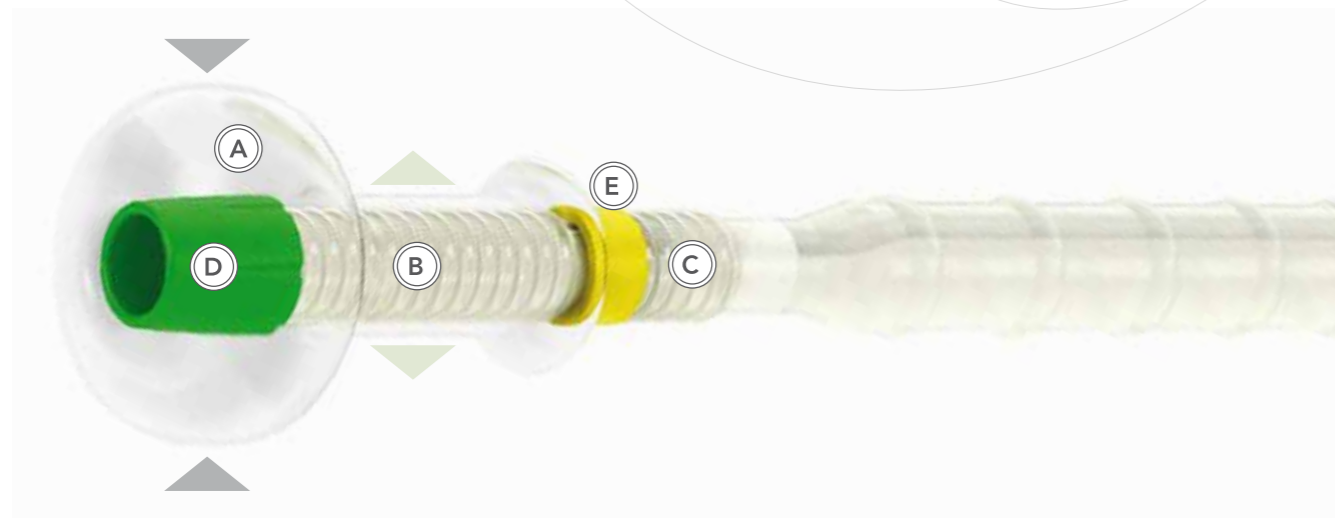

Avantages

... innovant, fonctionnel, design supérieur en polyuréthane

séparation des fonctions d'étanchéité et de collection de la diarrhée grâce aux

performances d'étanchéité optimisées par un ballonnet à micro-parois minces

joint combiné, rectal et trans-anal

avec adaptation dynamique à la motilité du rectum et des sphincters

comportement à basse pression optimisé grâce à un remplissage sans tension avec de l'air

étanchéité optimale également lors de diarrhées aqueuses

d'utilisation simple

Le système de drainage hyghtec est muni d'un ballonnet d'ancrage et d'étanchéité transanal en polyuréthane très fin et très résistant aux déchirures. Il se met déjà dans sa forme optimale de travail lors de sa mise en place. Placé dans un état mi-gonflé et mou, il se niche de façon optimale dans l'anatomie individuelle à la pression la plus basse possible. Le remplissage du drainage hyghtec se fait exclusivement avec de l'air.

Le drainage hyghtec épouse les formes du corps. Il prend la force agissant dans le rectum à travers le segment intra-rectal du ballonnet (A) et l'utilise dans le segment trans-anal (B) pour effectuer l'étanchéité.

En plus de son drainage et de son nettoyage efficace, le drainage hyghtec basic plus permet une irrigation rectale étanche.

Le drainage fécal hyghtec contribue de manière décisive à réduire la contamination de l'environnement de soins du patient

hyghtec[®] basic-plus

... pour une gestion optimale de l'intestin de manière hygiénique, et un contrôle efficace de la contamination de l'environnement de soins lors de diarrhées

Ⓕ

corps souple-olive en gel agréable

Ⓖ

canal de rinçage à grande lumière

Ⓗ

ouverture de rinçage atraumatique

